

Stockage & traitement des déchets

Conserver le test DrugID® à une température comprise entre +5 bis +25 °C. Ne pas exposer le test à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à +40 °C. Jeter les tests utilisés ou périmés avec les ordures ménagères. Tous les composants du kit de test sont sans danger pour l'environnement et peuvent être jetés avec les ordures ménagères dans le respect de la loi en vigueur.

Transport & utilisation sur le terrain

Lors du transport, le test DrugID® peut supporter une température comprise entre +5 et +35 °C et ce, pour une durée maximale de 3 jours. Effectuer le test à une température ambiante de + 5 °C à + 40 °C. Si la température est inférieure à + 5 °C, réchauffer le test DrugID® et la solution tampon.

En cas de manipulation de substances chimiques ou végétales, protéger le plan de travail de toute contamination à l'aide d'une feuille de papier ou d'un film protecteur. Protégez-vous ainsi que vos vêtements de toute contamination en utilisant des gants à usage unique.

La société Securetec vous apporte également conseil et soutien en matière de protection du personnel et de l'environnement.

Contrôle de qualité

Le test DrugID® comporte une ligne de contrôle (CL) intégrée. Cette ligne de contrôle indique le bon fonctionnement ainsi que la bonne exécution du test. Respecter les instructions complémentaires correspondant à votre situation propre.

Interférences

Utilisé conformément au mode d'emploi, le test DrugID® ne provoque pas d'interférences avec les adjuvants ou additifs suivants :

- autres drogues / médicaments : acide acétylsalicylique (aspirine) lidocaïne, paracétamol, procaine, tétracaine
- huiles aromatiques et substances végétales : menthe, acide salicylique, thym
- Détergents, bases /acides: benzoate de sodium, bicarbonate de sodium, savons et produits d'entretien
- poudres de coupe : acide ascorbique, henné, cacao, caféine, farine de maïs, sulfate de magnésium, nitrate de sodium, amidon
- sucres de coupe : glucose, inositol, lactose, mannose, saccharose, sorbitol

Information pour commande

Tests DrugID® disponibles:

Tests mono-drogues

DrugID® Cocaine	Réf. ID-06-COC
DrugID® Cannabis	ID-05-CAN
DrugID® Amph./Meth./XTC	D-08-AMP
DrugID® Opiates	ID-07-OPI

Test multi-drogues

DrugID® Coc/Opi/Amph./Meth.	Réf. ID-20-AMP/COC/OPI
-----------------------------	------------------------



Securetec Detektions-Systeme AG · Eugen-Sänger-Ring 1 · 85649 Brunnthal · Germany
T +49 89 203080-1651 · F +49 89 203080-1652
info@securetec.net · www.securetec.net
© 2011 Securetec Detektions-Systeme AG · 70015-v02-FRZ-110426



DrugID®

Dépistage de stupéfiants sur des
échantillons solides

Mode d'emploi
Tests mono- et multi-drogues

Domaine d'utilisation

Le test DrugID® est un test immunochimique destiné au dépistage de stupéfiants. Le résultat est fiable et précis, même en présence d'une quantité très faible de drogue. DrugID® est un test préliminaire à usage unique. Il ne peut être utilisé devant les tribunaux. Soigneusement fermé, le flacon de solution tampon livré avec le kit peut être utilisé pour conservation comme pour un envoi postal.

Principe du test

Le principe du test DrugID® repose sur une réaction immuno-
nologique. Une substance solide inconnue (poudre, comprimé, cristaux ou blocs, matériel végétal) est examinée afin de dépister la présence de stupéfiant. Pour ce faire, un échantillon de la substance suspectée est transposé dans un flacon de solution tampon qui sert de conducteur. La bandelette réactive du test contient des anticorps spécifiques à chaque type de drogue, marqués en rouge, qui colorent respectivement les lignes de réaction et de contrôle en rouge. Le résultat du test est visible au bout de 3 minutes. Observer le mode d'emploi pour une lecture correcte du résultat.

Contenu du paquet

Le kit de test DrugID® vous apporte le matériel nécessaire au dépistage de stupéfiants. DrugID® contient :

- 1 boîtier de test DrugID® (avec 1 ou 2 bandes de test suivant le produit)
 - Une spatule de plastique (chargée en électricité statique)
 - Un flacon de solution tampon (scellé avec numéro de lot)
- L'emballage et le fond du flacon peuvent être utilisés pour écraser ou réduire en poudre les échantillons végétaux ou résineux.

Mesures de précaution


- Utiliser toujours des gants à usage unique!
- Éviter toute contamination avec les substances!
- Éviter le contact des substances avec les yeux!
- Porter un masque protégeant la bouche lors des tests sur de la poudre!

Ni le kit de test ni la solution tampon ne contiennent de substances nuisibles à l'environnement. Le seuil de contamination avec la substance suspecte est inférieur à 1 mg. Le flacon de solution tampon est scellé afin d'empêcher toute contamination.

I. Préparation du test

1. Pour chaque test, utiliser de nouveaux gants stériles et éviter toute contamination par des substances inconnues.
2. Préparer un plan de travail propre et non contaminé pour le test (en utilisant une feuille de papier ou d'aluminium par ex.)
3. Préparer le flacon de solution tampon et le kit de test. Vérifier la date limite d'utilisation, s'assurer que l'emballage n'est pas endommagé et que le flacon est bien scellé.
4. Ouvrir l'emballage au niveau des encoches.
5. Poser le contenu de l'emballage et le flacon de solution tampon sur la surface de travail.

II A. Phases du test : poudres, comprimés, blocs ou cristaux

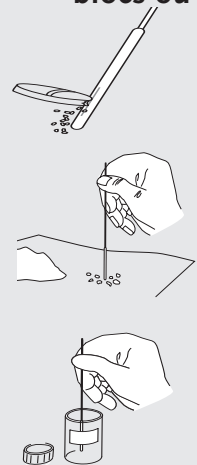


6a. Pour les comprimés, cristaux ou blocs : utiliser la spatule pour racler des particules de la substance à tester. La quantité présente sur le bâtonnet suffit à l'analyse. poudres : prélever une faible quantité de substance à l'aide de la spatule.

7a. Tapoter délicatement 2 à 3 fois le bâtonnet sur la surface de travail pour réduire la quantité de poudre.

8a. Ouvrir le flacon de solution tampon, placer le bâtonnet contaminé dans la solution tampon, remuer 5 secondes.

II B. Phases du test : échantillons végétaux et résines

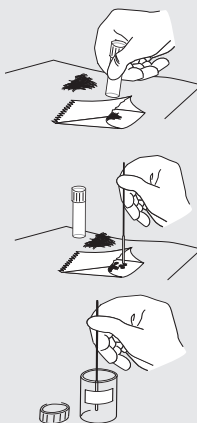


6b. Placer l'échantillon de substance testé dans l'emballage d'aluminium ouvert au niveau de l'encoche.

7b. Utiliser le fond du flacon pour réduire ou écraser l'échantillon.

8b. Prélever une grande quantité de substance à l'aide de la spatule.

9b. Ouvrir le flacon de solution tampon, placer le bâtonnet contaminé dans la solution tampon, remuer 5 secondes.

III. Phases suivantes & analyse de l'échantillon

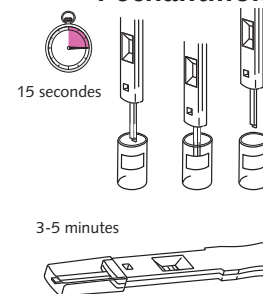


9. Enlever le capuchon de protection du test et plonger la bande réactive dans le flacon de solution tampon durant 15 secondes

10. Poser le test DrugID® à l'horizontale sur le plan de travail. Le résultat du test est visible au bout de 3 à 5 mn

IV. Lecture du résultat du test DrugID®


La ligne de contrôle rouge dans la fenêtre de lecture garantit la bonne exécution du test. L'apparition d'une ligne réactive indique la présence des substances recherchées.

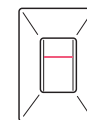

Ligne de contrôle

Résultat négatif = pas de présence de drogue


Seule la ligne de contrôle apparaît dans la fenêtre de lecture

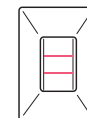

Ligne de contrôle
Ligne de test

Résultat positif = présence de drogue

Les lignes de contrôle et de test sont bien visibles dans la fenêtre de lecture

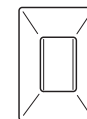

Absence de ligne de contrôle

Test nul

Origine de l'erreur : le test est défectueux ou le mode d'emploi n'a pas été suivi correctement. Recommencer le test à partir de la phase 9.

Précisions concernant la lecture du résultat

- Test de cocaïne : un résultat positif indique la présence de crack, cocaïne HCL ou cocaïne base.
- Test d'opiacés : un résultat positif indique la présence d'héroïne brune, blanche, de morphine, monoacétylmorphine, d'opium, résine d'opium, de codéine.
- Test d'amphétamines/ méthamphétamines : un résultat positif indique la présence d'amphétamines, d-méthamphétamine hydrochlorée, MDA, MDMA, méphédron, MDE.
- Test de cannabis : un résultat positif indique la présence de haschisch, marihuana, huile de cannabis, Delta-9-Tetra Hydro Cannabinol (D9-THC) et autres substances de ce groupe.